

Bluelight

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

Kullanım Kılavuzu
Instruction Manual

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



**444
8258**

BLUE

0850 3212583

0212 270 7470



**2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ**



**ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ**



CE
0197



**SON 10
ÖLÇÜM HAFIZASI**



**34 / 44 °C Aralığında
ÖLÇÜM YAPABİLME**

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

KT
TRADE

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



BLUE
0850 321 2583
0212 270 7470



2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ

Değerli Müşterimiz,

Bluelight'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiştir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ilerleyen zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no'lu telefon numarası ile hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde doğrudan bu numaraları arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müşteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde başvurabilirsiniz. Bu kullanım kılavuzu elektrikli ocağın kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satışı sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR. HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

ÖNEMLİ NOT

Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taşımak amacındadır. Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliştirildiyse de, bu kılavuz ve ürününüz arasında bir takım farklılıklar olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir, çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı ortaya çıkabilecek bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda oluşabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri yetkililerimiz ile iletişime geçiniz. Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın. İlk kullanımdan önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!

KULLANIM TALİMATI

Kullanmadan önce, kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

Dijital termometre, kulak kanalına yerleştirildiğinde kızılötesi sıcaklık ölçme kabiliyetine sahip bir cihazdır. Bu ürün, kulak yoluyla vücut sıcaklığını ölçmek için güvenli bir cihazdır.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Kızıl Ötesi Kulak İçi Dijital Termometrenin Kullanım Amacı

Kulak içi termometreniz, vücut sıcaklığını kulak zarından ölçmek için tasarlanmıştır. Kulak içi termometreyi vücudun herhangi başka bir bölgesinde kullanmayınız; hayvanlar ve nesnelere üzerinde kullanmayınız.

Lütfen kulak içi termometrenin tıbbi tanı ve tedavi yerine geçmediğini unutmayınız. Vücut sıcaklığının herhangi bir şekilde yorumlanması için uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Bu talimatları cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. Cihazı başka birinin kullanımına verirken mutlaka kullanım talimatlarını içeren bu kullanım kılavuzunu da veriniz. Aşağıda maddelenmiş talimatlara uymamanız halinde ortaya çıkacak muhtemel sorunlar, hasar ve arızalar garanti kapsamı dışında işlem görecektir ve cihazınızın garanti dışı kalacaktır.

Güvenlik Talimatları

- Bu cihaz, gözetim ve denetim altında olmadan 12 yaşın altındaki çocuklar ve/veya akli dengesi yerinde olmayan kişilerin kullanımına verilemez.
- Yutulduğu takdirde piller hayati tehlike oluşturabilir. Bu yüzden cihazın ve pillerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmeleri gerekmektedir. Pilin yutulması durumunda derhal tıbbi müdahale talebinde bulunun.
- Cihazı sıvıların içine daldırmayınız. Cihazı kuru halde tutunuz.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Cihaz 10 ile 40 °C (50 ile 104 °F) arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. Cihazın daha düşük ya da yüksek sıcaklıklarda çalıştırılması arızalara sebebiyet verebilir. Bu tür bir durumda cihaz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazdaki arızaları kendi başınıza onarmaya çalışmayınız. Cihazın içini açmayınız. Bu tür bir işlem garanti kapsamı dışında işlem görecektir. Cihaz ile ilgili tüm arızalarda merkez teknik servisimize başvurunuz.
- Her kullanımdan sonra cihazı temizleyiniz.
- Ölçüm yapan sonda uca dokunmayınız.
- Termometreyi kulak kanalı ıslakken kullanmayınız.
- Kulak içi hastalıklardan şikayetçi olan kişilerin bu ürünü kullanması önerilmez.
- Sonda kısmını kulağa sokmak için aşırı güç kullanmayınız.
- Cihazı aşırı sarsmaktan ve düşürmekten sakınınız.

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

- Egzersiz, banyo ve ortam değişiklikleri sonrası (30 dk içinde) ölçüm yapmak sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Bu tür değişimler sonrası ölçüm öncesinde 30 dk bekleyiniz.
- Birden fazla ölçüm yapılacaksa, ölçüm aralarında en az 3 dakika bekleyiniz.
- Kullanıcının daha sağlıklı sonuçlar için aynı kulaktan 3 farklı ölçüm yapması önerilir. Ölçülen değerlerden en yüksek olanını dikkate alınız.

SEMBOLLER & ANLAMLAR

°C/°F SICAKLIK BİRİMLERİ
C / Santigrat - F / Fahrenheit



PİL ZAYIF UYARISI
Cihaz Pilini Değiştiriniz

M8 BELLEK SEMBOLLERİ
Son 10 Ölçümü Bellekte Tutar



DÜŞÜK VÜCUT ISISI
Ölçüm Sonucunun 34 °C'den
(93.2 °F) Düşük Olduğu
Anlamına Gelir



ÖLÇÜME HAZIR İŞARETİ
Cihazı Kulak İçine Yerleştiriniz



YÜKSEK VÜCUT ISISI
Ölçüm Sonucunun 38 °C'den
(100.4 °F) Yüksek Olduğu
Anlamına Gelir

ÖZELLİKLER

Cihaz kullanım ömrü 10 yıldır. EN12470-5:2003 Standartlarına göre yapılmıştır. **Klinik Termometreler - Bölüm 5: Kızılötesi kulak termometreleri performansı.** Bu cihaz IEC 60601-1, IEC 60601-1-11 ve IEC 60601-1-2 gerekliliklerine uygundur.

Görüntülenen Sıcaklık Aralığı: 34.0 °C ~ 44.0 °C (93.2 °F ~ 111.2 °F)

- **Görüntü L °C** (L °F) ısı altında 34.0 °C (93.2 °F)
- **Görüntü H °C** (H °F) sıcaklık 44.0 °C (111.2 °F) üzerinde olduğunda.

Çalışma Ortamı:

- **Sıcaklık:** 16 ~ 35 C° (60.8 ~ 95.0 °F)
- **Nem:** < 80% RH

Depolama ve Taşıma Koşulları:

- Sıcaklık: -25 °C ila 55 °C (-13 °F ila 131 °F)
- Nem: % 85 RH

Sıcaklık Aralığı Görüntüleme Çözünürlüğü: 0.1 °C (0.1 °F)

Doğru Hesaplama:

- ± 0.2 °C (35.5 °C 42.0 °C için hata payı vardır).
- ± 0.4 (95.9 °F 107.6 °F)

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

EKRAN

Saydam kristal ekran, 3,5 basamaklı sıcaklık değeri: ölçme işleminde maksimum sıcaklığı görüntüler.

- **Sıcaklık birimi:** Santigrat veya Fahrenheit
- **Bellek Görüntüleme:** Son 10 ölçüm
- **Düşük Voltaj Uyarısı:** LCD ekranda PİL işareti "☹" gösterilir ve sonra bir bip sesi duyulur.

Pil: 1 adet 3V Lityum pil (CR 2032)


Pil Ömrü: Ortalama 1500 ölçüm yapabilir.

Boyut: 35 mm x 35 mm x 110 mm

Net Ağırlık: 37 Gram

Bip Sesi: Açma / Kapama, Ölçme işlemi bittiğinde, pil azaldığında.

Test Etme: Cihazı açmak için düğmeye "on/recall" basın 1 saniye içinde LCD ekrana görüntü gelir.

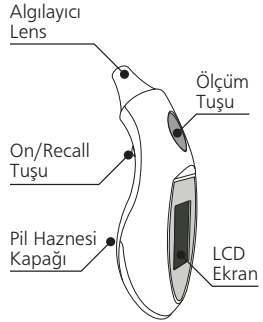

DİKKAT! / UYARILAR!

1. Ölçme işleminden önce, doğru ölçüm yapabilmesi için cihaz, ölçüm yapılacak oda sıcaklığında cihaz yarım saat bekletilmelidir.
2. Ölçümün yapılacağı kulak kanalı temiz değil ise, ölçüm sonucu yanlış çıkacaktır.

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

3. Uzun süre kullanılmayan piller bayatlayacağı ya da deşarj olacağından pil göstergesini kullanım öncesi kontrol ediniz.
4. Cihazın LCD ekranında "?" işareti cihazın ölçüm yapmaya uygun olduğunu gösterir.
5. Cihaza zara verebilecek sert süngerle ve aşındırıcı maddeler ile cihazı silmeyin, sert sünger ve aşındırıcı maddeler ile temizlenirse cihaz ölçüm doğruluğunu kaybeder.
6. Tuşuna bastığınızda herhangi bir değişiklik olmuyor ise, cihazın pillerini çıkarıp tekrar takınız.
7. Orta kulak iltihabı veya kulak rahatsızlığı olan kişilerin ateş ölçümleri hatalı çıkacağından bu kişilerin cihazı kullanması uygun değildir.
8. Bu üründe, Avrupa Direktiflerinde belirtilen şartlara uygun piller kullanılır. 2006/66/EEC.

CİHAZIN KULLANIMI (Örnek °C Kullanımı)

Cihazla, kulak yolu kullanılarak vücut sıcaklığının ölçümü yapılır.

1. Cihazı açmak için "on/recall" tuşuna basın cihaz açılır ve bip sesi duyulur. Bir saniye içinde LCD ekrana, "Şekil A" görüntüsü gelir. Cihaz ölçüm yapmak için hazır olduğunda LCD ekrana "Şekil B" görüntüsü gelir.



Şekil A



Şekil B

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

2. Ölçüm yapmadan önce kulak kıkırdağından yukarı doğru çekiniz sonra tekrar bırakınız. Bu hareket Kulak yolu ve kulak zarının daha net görünmesini ve daha sağlıklı bir ölçüm yapmanızı sağlar.



0-1 Yaş



1 + Yaş

- 1 yaşının altındaki çocuklar için, kulağı geriye doğru çekiniz.
- 1 yaşının üstündeki çocuklar ve yetişkinler için, geriye ve yukarıya doğru çekiniz.

Uyarı: Çocuk hekimleri kulaktan ateş ölçerlerin 11 aydan büyük çocuklarda kullanılmasını önerir.


3. Kulağı çekerken cihazın ağzını yavaşça kulak yoluna sokunuz (En iyi sonucu almak için cihazın ucunu olabildiğince kişiye zarar vermeyecek şekilde derine yerleştiriniz.) ardından "Scan" tuşuna basınız. Bip sesini duyduğunuzda ölçüm işlemi tamamlanmıştır. Cihazı kulaktan çıkarabilirsiniz. LCD ekran vücut sıcaklığını göreceksiniz.
4. **Tekrar Ölçüm:** Tekrar ölçüm için, "🔍" sembolü görüntülenene kadar "Scan" tuşuna basmayınız. Sembol çıktıktan sonra "Scan" tuşuna basarak tekrar ölçüm yapabilirsiniz. **ÖNERİ: İki ölçüm arasındaki zaman en az 3 dakika olmalıdır. Aksi halde yanlış ölçüm sonuçları alabilirsiniz!**

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

5. **Hafıza:** Son 10 ölçümü (No.9 - No.0) görmek için "on/recall" tuşuna basın. LCD ekran "Şekil C" ve "Şekil D"deki gibi olacaktır.



6. Ortam sıcaklığı 10 °C – 35 °C arasında değil ise, cihazın LCD ekran "Şekil E"deki gibi olacaktır.

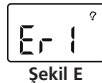

UYARI: Ölçme işleminden önce doğru ölçüm yapabilmesi için cihaz, ölçüm yapılacak oda sıcaklığında yarım saat bekletilmelidir.

7. **Kapatma:** Cihaz otomatik olarak bir dakika içinde kapanır.

Ölçümü Dereceden Fahrenheitta Çevirme

°C ve °F arasındaki geçiş yapmak için, cihazı açın. "On/Recall" tuşuna 3 saniye kadar basılı tutulursa, Lcd ekran Şekil F 'deki gibi olur ve cihaz ölçüm için hazırdır.



Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

Temizleme ve Saklama


Cihazın kullanılabilirliği en az 3 sene bir test edilmelidir.

Sonda Lensi: Diğer şahıslardan enfeksiyon kapmamak için, lütfen termometre lensini her ölçümden sonra alkollü küçük bir bezle temizleyiniz.

Önemli Not: Termometre lensini doğrudan yıkamak için su kullanmayınız!

Termometre: Lütfen termometreyi yumuşak ve kuru bir kumaşla temizleyiniz. Termometre gövdesi suyla yıkanmaz!

- Toz ve kirden arındırılmış ve kuru bir yerde saklayın cihaz doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Depolamada ortam sıcaklığı -25°C ve 55°C arasında olmalıdır. Cihazı temizlemek için alkol (% 70 izopropil) ile nemlendirilmiş sünger veya pamuklu bir bez kullanın.

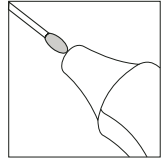


- Hiçbir sıvının cihazın iç kısmına girmeyeceğinden emin olunuz. Cihazda oluşabilecek sıvı temasları garanti kapsamı dahilinde işlem görmeyecektir.
- Temizliği için aşındırıcı kimyasal temizlik maddeleri, tiner veya benzin kullanmayın ve su ya da diğer temizleme sıvıları içine cihazı asla sokmayınız. Cihazın uç sensör kısmını veya ekran yüzeyini çizmemeye dikkat ediniz.

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Pil voltajı düşük olduğunda, LCD pil boş sembolünü "☐➔" gösterir. Eski pili, yeni bir pille değiştirin. Termometrenin pilleri azalmış ise doğru çalışmıyor olabilir. Termometre 3 voltluk lityum pil (CR 2032) ile birlikte çalışır.

Pili değiştirmek için:

1. Pil kapağını dışarı kaydırınız.
2. Bir adet CR-2032 Lityum Pil (3 V) alınız ve artı ucu yukarı gelecek şekilde pil haznesine yerleştiriniz.
3. Pil kapağını ileri doğru iterek yerine yerleştiriniz.

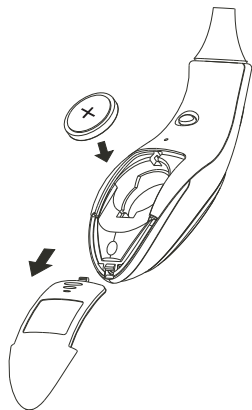

PİLLER & UYGUN KULLANIMI

Piller kolay tutuşan maddeler içerebilir. Yanlış kullanıldığı takdirde, pilde sızıntı, ısınma, patlama veya tutuşma meydana gelerek yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir. Bu tür bir durumu engellemek için lütfen cihazınızı aşağıdaki maddelere uygun kullanınız.

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

- Pili asla ŞARJ ETMEYİNİZ.
- Pile KISA DEVRE YAPMAYINIZ.
- Pili ISITMAYINIZ ya da ATEŞE ATARAK İMHA ETMEYE ÇALIŞMAYINIZ!
- Pili PARÇALARINA AYIRMAYINIZ ya da ŞEKLİNİ BOZMAYA ÇALIŞMAYINIZ, DARBE UYGULAMAYINIZ. Ellerinizi ve parmaklarınızı yaralanabilir. Pilin sıvısı gözlerinize kaçabilir veya cildinize yapışabilir. Böyle bir durumda zarar gören bölgeyi bolsu ile yıkayarak derhal bir doktora başvurunuz.
- Pili düşürerek ya da atarak sert darbelere maruz bırakmayınız. Kısa devre ihtimalini önlemek için pozitif (+) ve negatif (-) uçları ters bağlamayınız.
- Kullanılmış pili cihazdan HEMEN ÇIKARINIZ. Kullanılmış pili imha çöplerine atınız.
- Daima aynı türde pil kullanınız.
- Cihazda bulunan iletken pil kontaklarınının temiz olduğundan emin olunuz. Temizlik sağlanana kadar pili cihaza takmayınız.

SORUN GİDERME REHBERİ

Sorun

- Sürekli düşük sıcaklık ölçümleri.

Muhtemel Neden

- Sonda kulak kanalına doğru yerleştirilmemiş olabilir.
- Sonda lensi kirli olabilir.

Çözüm

- Sondanın ucu kulak kanal açıklığı karşısında rahat ve tamamen oturmuş şekilde bulunmalıdır. Sondanın doğru yanlış yerleştirilmesi bu tür sonuçlara sebep olabilir.
- Lensi yumuşak ve alkolle hafifçe nemlendirilmiş bir bezle iyice temizleyiniz.

Sorun

- Alınan sıcaklık ölçümü, ölçüm aralığında değil.

Muhtemel Neden

- Tarama serileri kulak kanalının içinde gerçekleştirilmemiş olabilir.

Çözüm

- Termometrenizi kulak içi dışında çalıştırdığınızda bu tür sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ölçümü kulak içinde yapınız.

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

Sorun

- Pil zayıf uyarısı.

Muhtemel Neden

- Pil ölçüm yapabilmek için çok zayıf.

Çözüm

- Pili yenisi ile değiştiriniz. Atık pili kurallara göre imha ediniz. Çöpe atmayınız.

GERİ DÖNÜŞÜM & ATIK (WEEE)

Bu cihaz , WEEE direktifleri doğrultusunda geri dönüşümü yapılabilir maddelerden üretilmiştir. Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atıkları ile atmayınız. Yerel makamlara başvurunuz. Ürün üzerinde bulunan işaretler ve ürün beraberinde verilen kullanma kılavuzunda belirtilen değerler ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler ürün kullanım ve ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

KT
TRADE

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



BLUE
0850 321 2583
0212 270 7470

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR. HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDIKTAN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

KT İÇ VE DIŞ TİC. GIDA SAN. LTD ŞTİ.

444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr

ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

Garanti Belgesi

Belge Onay Tarihi: 03.05.2013

Belge No: 123054

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : **KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Tic. Ltd. Şti**
Merkez Adresi : 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beşiktaş / İstanbul
Telefonu : 0 212 270 74 70
Faksı : 0 212 270 75 74

Firma Yetkilisinin

İmzası / Kaşesi

**KT İÇ VE DIŞ TİCARET
GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.**
Lale Sokak No:14 1.Levent-Beşiktaş
Tel: +90 212 270 7470 & 270 7574
İSTANBUL/Beşiktaş V.D. 541 041 1639

ÜRÜNÜN

Cinsi : Dijital Kulaktan Ateş Ölçer
Markası : BLUELIGHT
Modeli : ET-100B
Bandrol ve Seri No.'su : -
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) İŞ GÜNÜ

Garanti Belgesi / Satıcı ve Müşteri Bilgileri

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Adresi

Telefonu

Faksı

Fatura Tarihi ve No.'su

No

Firma Yetkilisinin İmzası / Kaşesi

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı / Soyadı

Adresi

İli / İlçesi

Telefonu

E-Posta Adresi

Servis Geçmişi / Servis Listesi

SERVİS GEÇMİŞİ

Arıza Takip No. Arıza Açıklaması

KT.

Arıza Takip No. Arıza Açıklaması

KT.

Arıza Takip No. Arıza Açıklaması

KT.

Arıza Takip No. Arıza Açıklaması

KT.

ÖNEMLİ NOT: GARANTİ YALNIZCA, SATIŞ FATURASI VE GARANTİ BELGESİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANTİ BELGENİZİ MUHAFAZA EDİNİZ.

SERVİS LİSTESİ


- 1 ELİPS Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
T 0212 337 02 00
A Kore Şehitleri Cad. Mithat Ünlü Sok.
No. 1-3, **Zincirlikuyu - İstanbul**
- 2 DATATEKNİK Elek. Serv. Hiz. Bil. Ltd. Şti.
T 0212 322 231 12 65
A Mahfesiğmaz Mah. Turgut Özal Bulv.
Akasya Apt. No. 103 Bodrum Kat D.17
Çukurova - Adana
- 3 Murat Oğuz / Teknik Servis
T 0352 232 16 39
A Yanıkoğlu Mah. Şadırvan Sok.
Ender Apt. No. 4, **Kayseri**

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düşmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Satıcı/Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bluelight

Bluelight Life / Dijital Kulaktan Ateş Ölçer ET-100B

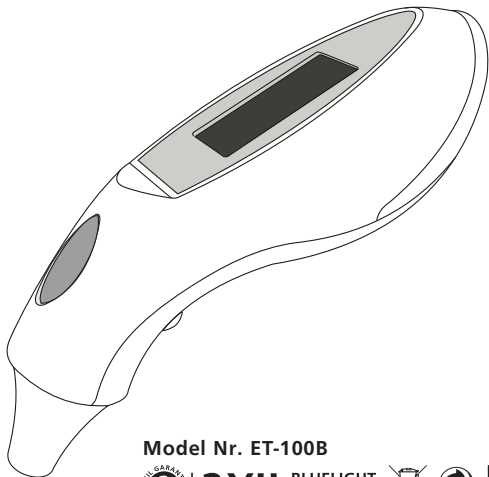

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



444
8258

BLUE
2583

0850 321

0212 270 7470



SON 10
ÖLÇÜM HAFIZASI



34 / 44 °C Aralığında
ÖLÇÜM YAPILABİLME

Model Nr. ET-100B



2 YIL BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ



0197

Seri No. BLDKA13600001



8 699036 581557

CE
0197

İthalatçı Firma

KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Ltd. Şti.
Lale Sokak No:14 1. Levent - İstanbul
T 0212 270 74 70 F 0212 270 75 74

Üretici Firma

Hangzhou Hua'an Medical & Health
Instruments Co, Ltd., CHINA

Made in P.R.C.

www.bluelight.com.tr / destek@bluelight.com.tr